

**SENCILLO
EFECTIVO
FIABLE**



Catálogo Ambu® Anestesia

Ambu

INDICE

04 Mascarillas Laríngeas

- 06 AuraGain
- 08 AuraOnce
- 09 Aura-I
- 10 Aura-Flex
- 11 Aura-Straight

12 Resucitadores

- 14 SPUR II
- 16 Oval Plus
- 17 Mark IV

18 Mascarillas Faciales

- 20 King Masks
- 22 Mascarillas faciales de un solo uso
- 23 Mascarillas faciales reutilizables

24 Accesorios

- 24 Manómetro de presión Gauge (masc laríngeas)
- 24 Manómetro de presión desechable
- 24 Válvula PEEP de un solo uso
- 24 Válvula PEEP reutilizable

26 Sostenibilidad

- 26 Responsabilidad Social Corporativa



El ajuste ideal para cada paciente



Una opción fiable a las Emergencias



Soluciones de calidad para cada situación clínica

Mascarillas Laríngeas Ambu®

LA CALIDAD IDEAL PARA CADA SITUACIÓN CLÍNICA

El portfolio Aura™ Ambu® es la gama de mascarillas laríngeas de un solo uso, disponible en distintas variantes de producto desarrolladas para diferentes necesidades clínicas y preferencias de usuario.

Adecuadas tanto para uso rutinario como de emergencia. Son productos con rápida inserción y altas presiones de sellado, lo que le permiten la permeabilidad de la vía aérea a través de la cual se puede ventilar al paciente. El manguito inflable, suave y fino, ofrece un sellado con una presión de manguito baja que se adapta a la forma de la anatomía de la vía aérea.



PORTFOLIO DE MASCARILLAS LARÍNGEAS AMBU®

- AuraGain, la mascarilla laríngea de la segunda generación
- AuraOnce, la mascarilla laríngea con la curvatura anatómica
- Aura-i, la mascarilla laríngea que permite la intubación
- AuraFlex, la mascarilla laríngea flexible
- AuraStraight, la mascarilla laríngea recta




Ambu® AuraGain™

La Ambu AuraGain es una vía aérea supraglótica de segunda generación adecuada tanto para la anestesia rutinaria, vías aéreas difíciles como dispositivos de rescate y/o conducto para intubación, y también en reanimación. La Ambu AuraGain está disponible en una gama completa de 8 tamaños, para su uso en pacientes neonatos, pediátricos y adultos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Amplio canal gástrico para facilitar la inserción de la sonda gástrica
- Diseñado con la curvatura anatómica original
- Manguito inflable fino y suave
- Bloque mordedor que evita oclusiones ante mordida del paciente
- Placa posterior plana de gran dimensión para mayor estabilidad durante la colocación
- Marcas de navegación para uso de FBO o VD
- Conectores específicos de bajo volumen para los tamaños 1 y 1,5 diseñados para reducir el espacio muerto

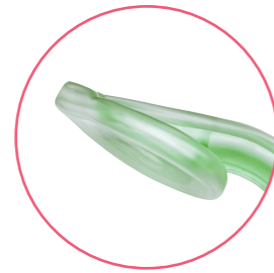

Manguito inflable fino y suave



Curvatura anatómica original



Amplio canal gástrico



Guía de profundidad



Placa posterior plana de gran dimensión



Marca de navegación



ASPECTOS CLÍNICOS

- Vía aérea supraglótica de segunda generación con fácil colocación de sonda gástrica, altas presiones de sellado (documentadas hasta 40cmH₂O) y tiempos de inserción rápidos
- Sellado con baja presión en el manguito que se ajusta a la anatomía y minimiza el traumatismo de los tejidos blandos
- Puede utilizarse como conducto para la intubación, con la ayuda de un endoscopio flexible
- Compatible con RM



ESPECIFICACIONES DEL PEDIDO

Referencia	Talla	Descripción	Peso del paciente	Talle máx. tubo gástrico	Talla máx. ETT	Color	Unidades por caja
408100000	1	Ambu AuraGain talla 1	2-5kg	6FR	3,5mm	●	10
408150000	1,5	Ambu AuraGain talla 1,5	5-10kg	8FR	4,0mm	●	10
408200000	2	Ambu AuraGain talla 2	10-20kg	10FR	5,0mm	●	10
408250000	2,5	Ambu AuraGain talla 2,5	20-30kg	10FR	5,5mm	●	10
408300000	3	Ambu AuraGain talla 3	30-50kg	16FR	6,5mm	●	10
408400000	4	Ambu AuraGain talla 4	50-70kg	16FR	7,5mm	●	10
408500000	5	Ambu AuraGain talla 5	70-100kg	16FR	8,0mm	●	10
408600000	6	Ambu AuraGain talla 6	>100kg	16FR	8,0mm	●	10



Ambu® AuraOnce™

El modelo Ambu AuraOnce es la mascarilla laríngea con curvatura anatómica. Diseñada para reproducir la curva natural de la anatomía de las vías respiratorias. Es adecuada para su uso en anestesia y en medicina de urgencias. Está disponible en una gama completa de 8 tamaños.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Mascarilla laríngea con curvatura anatómica original
- El diseño del manguito evita que se doble hacia atrás
- Altas presiones de sellado y tiempos de inserción rápidos
- Compatible con RM



ESPECIFICACIONES DEL PEDIDO

Referencia	Talla	Descripción	Peso del paciente	Color	Unidades por caja
321100000	1	Ambu AuraOnce talla 1	2-5kg	●	10
321150000	1,5	Ambu AuraOnce talla 1,5	5-10kg	●	10
321200000	2	Ambu AuraOnce talla 2	10-20kg	●	10
321250000	2,5	Ambu AuraOnce talla 2,5	20-30kg	●	10
321300000	3	Ambu AuraOnce talla 3	30-50kg	●	10
321400000	4	Ambu AuraOnce talla 4	50-70kg	●	10
321500000	5	Ambu AuraOnce talla 5	70-100kg	●	10
321600000	6	Ambu AuraOnce talla 6	>100kg	●	10

Ambu® Aura-i™

La Aura-i es una mascarilla laríngea que también puede utilizarse como conducto para la intubación. Con útiles marcas de navegación para endoscopios flexibles, la Aura-i es ideal para su uso en casos de vía aérea difícil y en situaciones en las que no se puede intubar ni ventilar como dispositivo de rescate de la vía aérea. Está disponible en una gama completa de 8 tamaños.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Adecuada como conducto para intubación
- La carcasa del conector resistente a las mordeduras evita las oclusiones
- Diseñado con la curva anatómica original
- El diseño del manguito evita que se doble hacia atrás
- Compatible con RM



ESPECIFICACIONES DEL PEDIDO

Referencia	Talla	Descripción	Peso del paciente	Talla máx. ETT	Color	Unidades por caja
329100000	1	Ambu Aura-i talla 1	2-5kg	3,5mm	●	10
329150000	1,5	Ambu Aura-i talla 1,5	5-10kg	4,0mm	●	10
329200000	2	Ambu Aura-i talla 2	10-20kg	5,0mm	●	10
329250000	2,5	Ambu Aura-i talla 2,5	20-30kg	5,5mm	●	10
329300000	3	Ambu Aura-i talla 3	30-50kg	6,5mm	●	10
329400000	4	Ambu Aura-i talla 4	50-70kg	7,5mm	●	10
329500000	5	Ambu Aura-i talla 5	70-100kg	8,0mm	●	10
329600000	6	Ambu Aura-i talla 6	>100kg	8,0mm	●	10

Ambu® AuraFlex™

La AuraFlex es una mascarilla laríngea flexible adecuada para su uso en ORL, oftalmología, odontología y otros procedimientos de cabeza y cuello.

La gran flexibilidad del tubo de la vía aérea permite colocarlo alejado de la zona quirúrgica, lo que facilita el acceso sin afectar a la ventilación. AuraFlex está disponible en seis tamaños, del 2 al 6.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- El tubo flexible de la vía aérea permite su colocación lejos de la zona quirúrgica
- El tubo de vía aérea reforzado con alambre sin pliegues evita las oclusiones del tubo
- El diseño del manguito evita que la punta se pliegue hacia atrás



ESPECIFICACIONES DEL PEDIDO

Referencia	Talla	Descripción	Peso del paciente	Color	Unidades por caja
327200000	2	Ambu AuraFlex talla 2	10-20kg	●	10
327250000	2,5	Ambu AuraFlex talla 2,5	20-30kg	●	10
327300000	3	Ambu AuraFlex talla 3	30-50kg	●	10
327400000	4	Ambu AuraFlex talla 4	50-70kg	●	10
327500000	5	Ambu AuraFlex talla 5	70-100kg	●	10
327600000	6	Ambu AuraFlex talla 6	>100kg	●	10

Ambu® AuraStraight™

La AuraStraight es una mascarilla laríngea recta capaz de proporcionar altas presiones de sellado con un volumen de manguito bajo. Puede utilizarse en diversos entornos clínicos, como anestesia, urgencias y reanimación. La AuraStraight está disponible en una gama completa de 8 tamaños.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Mascarilla laríngea recta
- El diseño del manguito evita que la punta se pliegue hacia atrás
- Compatible con RM



ESPECIFICACIONES DEL PEDIDO

Referencia	Talla	Descripción	Peso del paciente	Color	Unidades por caja
324100000	1	Ambu AuraStraight talla 1	2-5kg	●	10
324150000	1,5	Ambu AuraStraight talla 1,5	5-10kg	●	10
324200000	2	Ambu AuraStraight talla 2	10-20kg	●	10
324250000	2,5	Ambu AuraStraight talla 2,5	20-30kg	●	10
324300000	3	Ambu AuraStraight talla 3	30-50kg	●	10
324400000	4	Ambu AuraStraight talla 4	50-70kg	●	10
324500000	5	Ambu AuraStraight talla 5	70-100kg	●	10
324600000	6	Ambu AuraStraight talla 6	>100kg	●	10

Resucitadores Ambu®

LA OPCIÓN FIABLE PARA LAS EMERGENCIAS

En 1956 salió al mercado la bolsa Ambu original, desarrollada por Holger Hesse y el Dr. Henning Reuben. Rápidamente se convirtió en un estándar fiable en hospitales y servicios de urgencias. Desde entonces, los reanimadores han seguido siendo el núcleo de la cartera de productos de Ambu.

Después de más de 65 años de innovación en resucitadores, Ambu sigue ofreciendo una gama de productos diseñados para satisfacer sus necesidades de ventilación, adecuada para cada paciente.



PORTFOLIO DE RESUCITADORES AMBU®

- SPUR II, un resucitador de un solo uso disponible en tres tamaños
- Oval Plus, un resucitador reutilizable disponible en tres tamaños
- Mark IV, un resucitador reutilizable con doble bolsa disponible en dos tamaños




Ambu® SPUR® II

La historia de innovación en reanimadores de Ambu se remonta a hace más de 65 años con el lanzamiento de la bolsa Ambu original.

El SPUR II representa el último desarrollo de Ambu en reanimadores. Disponible en tres tamaños y distintas configuraciones, el SPUR II tiene la familia completa de productos de uso en un único paciente que cubren todas las situaciones de urgencias y emergencias.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Asa integrada y superficie SafeGrip para un mejor manejo
- Sistema de válvula de cierre único de fiabilidad probada
- Bolsa autoinflable SEBS fina con excelente retroceso
- La rótula entre la válvula y la mascarilla permite una rotación de 360° del resucitador
- Protección contra salpicaduras en la exhalación del paciente y los fluidos alejándolos del usuario
- M-port para monitorizar etCO₂ o suministrar medicación
- Válvula limitadora de presión para evitar el suministro de una presión excesiva
- Clip de anulación que permite obtener presiones más altas, si es necesario

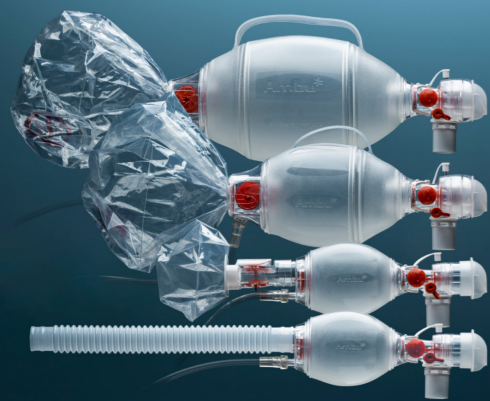

Asa integrada, superficie SafeGrip y bolsa de compresión TPE



Salvasalpicaduras



Válvula limitadora de presión y clip de anulación



Conector giratorio y m-port

ASPECTOS CLÍNICOS

- Reanimador ligero de uso en un solo paciente
- Capaz de suministrar el 100% de FIO₂ cuando se utiliza con una fuente de oxígeno
- La cubierta transparente permite ver el funcionamiento de la válvula
- Tamaño Adulto y Pediátrico pueden ser plegados para mejor almacenaje
- Compatible con el uso de PEEP Ambu y de Manómetro de Presión Desechable
- Compatible con RM

ESPECIFICACIONES DEL PEDIDO

Referencia	Descripción	Uds. caja
325002000	SPUR II Adulto, bolsa reservorio, tubo de oxígeno de 210 cm, masc. facial desechable mediana adulto	12
330003000	SPUR II Pediátrico, bolsa reservorio, tubo de oxígeno de 210 cm, masc. facial desechable bebé	12
330004000	SPUR II Pediátrico, bolsa reservorio, tubo de oxígeno de 210 cm, masc. facial desechable niños de 1 a 3 años	12
335103000	SPUR II Neonatal, bolsa reservorio, tubo de oxígeno de 210 cm, masc. facial desechable bebé	12
335102000	SPUR II Neonatal, bolsa reservorio, tubo de oxígeno de 210 cm, masc. facial desechable neonato	12
325031000	SPUR II Adulto, bolsa reservorio, tubo de oxígeno de 210 cm, masc. facial desechable mediana adulto y válvula PEEP	12
330030000	SPUR II Pediátrico, bolsa reservorio, tubo de oxígeno de 210 cm, masc. facial desechable niños de 1 a 3 años y válvula PEEP	12
335025000	SPUR II Neonatal, bolsa reservorio, tubo de oxígeno de 210 cm, masc. facial desechable neonato/bebé, válvula PEEP y manómetro	12
325023000	SPUR II Adulto, válvula de demanda, tubo de oxígeno de 210 cm, masc. facial desechable mediana adulto	12
330023000	SPUR II Pediátrico, válvula de demanda, tubo de oxígeno de 210 cm, masc. facial desechable bebé	12
335002000	SPUR II Neonatal, tubo reservorio, tubo de oxígeno de 210 cm, masc. facial desechable neonato	12
335003000	SPUR II Neonatal, tubo reservorio, tubo de oxígeno de 210 cm, masc. facial desechable bebé	12


Ambu® Oval Plus

El Oval Plus es un resucitador reutilizable que está disponible en una gama de tamaños completa diseñada para la ventilación manual de neonatos hasta adultos.

El producto puede esterilizarse hasta 30 veces a una temperatura de 134°C/273,2F, aunque la bolsa del depósito de O₂ sólo puede esterilizarse un total de 15 veces. El tubo del depósito de oxígeno sólo es apto para la limpieza manual y la desinfección química.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Sistema de válvula de obturación única de fiabilidad probada
- Válvula limitadora de presión para evitar el suministro de presión excesiva
- Compatible con RM
- Reutilizable y esterilizable a 134°C (excepto el tubo del depósito de oxígeno)

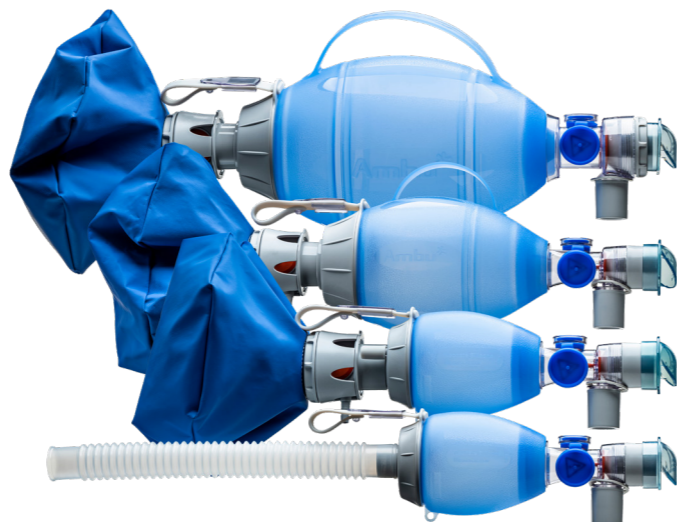

ESPECIFICACIONES DEL PEDIDO

Referencia	Descripción	Unidades por caja
A288203000	Ambu Oval Plus Neonatal, 2x bolsa reservorio y masc facial silicona mang abierto talla 0	1
A288103000	Ambu Oval Plus Neonatal, tubo reservorio y masc facial silicona mang abierto talla 0	1
370042000	Ambu Oval Plus Pediátrico, 2x bolsa reservorio y masc facial silicona mang abierto talla 1	1
370043000	Ambu Oval Plus Pediátrico, 2x bolsa reservorio y masc facial silicona mang abierto talla 2	1
370044000	Ambu Oval Plus Pediátrico, 2x bolsa reservorio y masc facial Silicona Reutilizable (azul) talla 0	1
470015100	Ambu Oval Plus Adulto con 2x bolsa reservorio	1
470016100	Ambu Oval Plus Adulto, 2x bolsa reservorio, y masc facial silicona mang abierto talla 5	1
470017100	Ambu Oval Plus Adulto, 2x bolsa reservorio, masc facial Silicona Reutilizable (azul) talla 5	1

Ambu® Mark IV

El Mark IV es un resucitador reutilizable de doble bolsa diseñado para la ventilación manual de adultos y niños, está disponible en dos tamaños; tamaño Adulto y tamaño Baby. El producto puede esterilizarse hasta 30 veces a una temperatura de 134°C/273,2F, sin embargo la bolsa del depósito de O₂ sólo puede esterilizarse un total de 15 veces. El tubo del depósito de oxígeno sólo es apto para la limpieza manual y la desinfección química.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Sistema de válvula de obturación única de fiabilidad probada
- Sistema de válvula de presión incorporado en el Mark IV Baby para evitar el suministro de presión excesiva
- Compatible con RM
- Reutilizable y esterilizable a 134°C (excepto el tubo del depósito de oxígeno)



ESPECIFICACIONES DEL PEDIDO

Referencia	Descripción	Unidades por caja
299006000	Mark IV Baby, 2x bolsa reservorio, masc facial Silicona Reutilizable (azul) talla 0A	1
299007000	Mark IV Baby, 2x bolsa reservorio, masc facial Silicona Reutilizable (azul) talla 0	1
299001000	Mark IV Baby, tubo reservorio, masc facial Silicona Reutilizable (azul) talla 0A	1
299003000	Mark IV Baby, tubo reservorio, masc facial Silicona Reutilizable (azul) talla 0	1
304002000	Mark IV Adulto, 2x bolsa reservorio, masc facial Silicona Reutilizable (azul) talla 5	1

Mascarillas Faciales Ambu®

EL AJUSTE IDEAL PARA CADA PACIENTE

Ambu ofrece una amplia gama de mascarillas de un solo uso y reutilizables, así como diversos tipos de manguitos. Son adecuadas para una multitud de aplicaciones clínicas y también están disponibles en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de todos los pacientes.



PORTFOLIO DE MASCARILLAS FACIALES AMBU®

- King Mask, mascarilla facial anestésica de un solo uso
- Mascarilla Facial Desechable, disponible con o sin válvula de inflado
- Mascarilla Desechable Manguito Abierto, un producto de un solo uso con manguito abierto
- Mascarilla Facial de Silicona, un producto reutilizable con un manguito autoinflable
- Mascarilla de Silicona Manguito Abierto, un producto reutilizable con manguito abierto




Ambu® King Mask

La mascarilla Ambu King Mask es una mascarilla anestésica de un solo uso con forma anatómica diseñada para mantener un sellado hermético alrededor de la anatomía facial con una presión mínima sobre la cara. Disponible en siete tamaños, con o sin ganchos para arnés, y también en variantes con aroma, la gama King Mask puede utilizarse para pacientes neonatos, pediátricos y adultos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Manguito con borde acolchado estriado, para un mejor agarre
- El manguito con forma anatómica permite un sellado hermético
- Mascarilla transparente para observar fácilmente el estado del paciente
- Válvula de inflado que permite inflar o desinflar el manguito para mejorar el sellado
- Existen mascarillas con aroma que pueden tener un efecto calmante, especialmente para los niños.

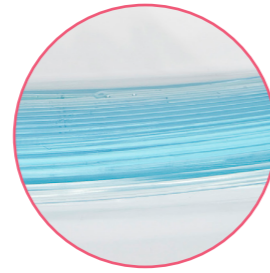

Manguito con borde acolchado estriado



Válvula de inflado



King Mask con distintos aromas



Capuchón transparente



ASPECTOS CLÍNICOS

- Manguito cerrado fino para un cierre hermético
- Opción con aroma disponible (Menta, Fresa, Chicle y Cereza)
- Disponible con gancho para arnés
- Compatible con RM

ESPECIFICACIÓN DEL PEDIDO SIN GANCHO PARA ARNÉS

Mascarilla facial	Talla 1	Talla 2	Talla 3	Talla 4	Talla 5	Talla 6	Talla 7RD
Código de color							
Original (Sin perfume)	1012UB	1022UB	1032UB	1045UB	1055UB	1065UB	1075UB
Fresh (Menta)	2012SB	2022SB	2032SB	2045SB	2055SB	2065SB	2075SB
Chicle		1122SB	1132SB	1145SB			
Fresa		1222SB	1232SB	1245SB			
Cereza		1322SB	1332SB	1345SB			
Pack con aromas variados		1423SB					

ESPECIFICACIÓN DEL PEDIDO CON GANCHO PARA ARNÉS

Mascarilla facial	Talla 3	Talla 4	Talla 5	Talla 6	Talla 7RD
Código de color					
Original (Sin perfume)	1032UH	1045UH	1055UH	1065UH	1075UH
Fresh (Menta)	2032SH	2045SH	2055SH	2065SH	2075SH
Chicle	1132SH	1145SH			
Fresa	1232SH	1245SH			
Cereza	1332SH	1345SH			
Pack con aromas variados	1433SH	1443SH			

Referencias terminadas en 2 = 20 por paquete. Referencias terminadas en 5 = 50 por paquete
Referencias terminadas en 3 = 30 por paquete. *(Pack variado de mascarillas perfumadas consta de 10 de cada: Chicle, Fresa y Cereza).

Ambu® Mascarilla Facial Desechable

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Manguito blando, con forma y lleno de aire para proporcionar un sellado hermético
- Mascarilla con espacio para poner el pulgar y facilitar el agarre
- Cubierta transparente para observación del estado del paciente
- De un solo uso
- Compatible con RM
- Disponible en 6 tamaños



ESPECIFICACIÓN DEL PEDIDO CON GANCHO PARA ARNÉS

Referencia	Descripción	Unidades por caja
000252051	Ambu Mascarilla Facial Desechable, neonatal (sin gancho para arnés)	20
000252052	Ambu Mascarilla Facial Desechable, bebé (sin gancho para arnés)	20
000252053	Ambu Mascarilla Facial Desechable, niños de 1 a 3 años	20
000252054	Ambu Mascarilla Facial Desechable pequeña para adultos y niños	20
000252055	Ambu Mascarilla Facial Desechable mediana para adultos	20
000252056	Ambu Mascarilla Facial Desechable grande para adultos	20
000252951	Ambu Mascarilla Facial Desechable con válvula de inflado neonatal (sin gancho para arnés)	20
000252952	Ambu Mascarilla Facial Desechable con válvula de inflado bebé (sin gancho para arnés)	20
000252953	Ambu Mascarilla Facial Desechable con válvula de inflado niños de 1 a 3 años	20
000252954	Ambu Mascarilla Facial Desechable con válvula de inflado pequeña para adultos y niños	20
000252955	Ambu Mascarilla Facial Desechable con válvula de inflado mediana para adultos	20
000252956	Ambu Mascarilla Facial Desechable con válvula de inflado grande para adultos	20

Hay otras referencias disponibles sin gancho para arnés. Consulte el comercial de su zona para más información o en ambu.es

Ambu® Mascarilla Desechable Manguito Abierto

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Manguito suave, moldeado para un ajuste cómodo
- De un solo uso
- Disponible en 8 tamaños



ESPECIFICACIONES DEL PEDIDO

Referencia	Descripción	Unidades por caja
306000000	Ambu Mascarilla Desechable Manguito Abierto talla 0 especial prematuro	20
306100000	Ambu Mascarilla Desechable Manguito Abierto talla 1 neonato	20
306200000	Ambu Mascarilla Desechable Manguito Abierto talla 2 bebé	20
306300000	Ambu Mascarilla Desechable Manguito Abierto talla 3 pediátrico con gancho para arnés	50
306400000	Ambu Mascarilla Desechable Manguito Abierto talla 4 pequeña adulto con gancho para arnés	50
306500000	Ambu Mascarilla Desechable Manguito Abierto talla 5 mediana adulto con gancho para arnés	50
306600000	Ambu Mascarilla Desechable Manguito Abierto talla 6 grande adulto con gancho para arnés	50
306700000	Ambu Mascarilla Desechable Manguito Abierto talla 7 extra grande adulto con gancho para arnés	20

Ambu® Mascarilla Facial de Silicona

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Manguito de silicona flexible y autoinflable que mantiene un cierre hermético
- Reutilizable y apto para ser reprocesado hasta 30 veces
- Compatible con RM
- Disponible en 6 tamaños



ESPECIFICACIONES DEL PEDIDO

Referencia	Descripción	Unidades por caja
000313000	Ambu Mascarilla Facial de Silicona talla 0A	1
000315000	Ambu Mascarilla Facial de Silicona talla 0	1
000316000	Ambu Mascarilla Facial de Silicona talla 2	1
000312000	Ambu Mascarilla Facial de Silicona talla 3 / 4	1
000317000	Ambu Mascarilla Facial de Silicona talla 5	1
000319000	Ambu Mascarilla Facial de Silicona talla 6	1

Ambu® Mascarilla Silicona Manguito Abierto

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Manguito de silicona suave moldeadas para un ajuste cómodo
- Reutilizable
- Disponible en 6 tamaños



ESPECIFICACIONES DEL PEDIDO

Referencia	Descripción	Unidades por caja
000251001	Ambu Mascarilla Silicona Manguito Abierto talla 0 neonato	100
000251002	Ambu Mascarilla Silicona Manguito Abierto talla 1 pediátrico pequeño	50
000251003	Ambu Mascarilla Silicona Manguito Abierto talla 2 pediátrico	50
000251004	Ambu Mascarilla Silicona Manguito Abierto talla 3 pediátrico	50
000251005	Ambu Mascarilla Silicona Manguito Abierto talla 4 adulto/adulto pequeño	50
000251006	Ambu Mascarilla Silicona Manguito Abierto talla 5 adulto	50

ACCESORIOS

Ambu® Manómetro de Presión Reutilizable

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Diseñado para inflar y controlar la presión del manguito de máscarillas laríngeas y tubos traqueales
- Conexión luer estándar
- Diseño ergonómico y robusto



ESPECIFICACIONES DEL PEDIDO

Referencia	Descripción	Unid. por caja
321900000	Ambu Manómetro de Presión Reutilizable para inflar y controlar presión de los manguitos	1
321000702	Tubo para el manómetro de presión, 1m (de un solo uso)	10

Ambu® Válvula PEEP Desechable

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Ajustable entre 1,5 - 20 cmH₂O
- De solo un uso
- Compatible con RM



ESPECIFICACIONES DEL PEDIDO

Referencia	Descripción	Unid. por caja
199102001	Ambu Válvula PEEP Desechable 20	8
199103001	Ambu Válvula PEEP Desechable con adaptador para neonatos y respiradores/sistema COAO 22/19mm	8

Ambu® Manómetro de Presión Desechable

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Con escala de colores para apoyo visual durante la ventilación
- De un solo uso
- Compatible con RM



ESPECIFICACIONES DEL PEDIDO

Referencia	Descripción	Unid. por caja
322003000	Ambu Manómetro de Presión de un solo uso	15

Ambu® Válvula PEEP 10 y 20 Reutilizable

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Ajustable para permitir la aplicación de distintos niveles de PEEP
- Reutilizable
- Se puede reprocesar hasta 30 veces



ESPECIFICACIONES DEL PEDIDO

Referencia	Descripción	Unid. por caja
A000137000	Ambu Válvula PEEP 10 reutilizable	1
A137001000	Ambu Válvula PEEP 10 reutilizable	1
A000138000	Ambu Válvula PEEP 10 reutilizable	1
A000177000	Ambu Válvula PEEP 20 reutilizable	1
A000213000	Ambu Válvula PEEP 20 reutilizable	1

COMPROMETIDOS CON LA

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

ENFOQUE EN ÁREAS DE ALTO IMPACTO

El principal objetivo de Ambu es ofrecer dispositivos innovadores que ayuden a los profesionales sanitarios a mejorar la atención al paciente y salvar vidas. Al mismo tiempo, somos muy conscientes de nuestra responsabilidad para con el planeta en el que todos vivimos. Por eso, mientras trabajamos para alcanzar objetivos de sostenibilidad a largo plazo, nos centramos en las áreas en las que creemos que podemos marcar la diferencia. Adoptamos medidas prácticas a lo largo de todo el ciclo de vida de nuestros productos, desde el diseño hasta la producción y la eliminación tras el fin de uso. Además, para asegurarnos de que somos responsables y realizamos progresos concretos, hemos formalizado nuestros compromisos, documentado nuestros esfuerzos y alineado las mediciones en todas nuestras sedes mundiales.



Como firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Ambu apoya sus diez principios en materia de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción, y contribuimos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Nuestras principales contribuciones en el ámbito del medio ambiente están relacionadas con los cuatro ODS siguientes:

OBJETIVOS GENERALES



95% de los productos que salgan al mercado después de 2025 serán libres de PVC

EN MARCHA



100% de envases reciclables, reutilizables o compostables para 2025

EN MARCHA



Reducir nuestras emisiones de carbono en un 50% para 2025, en comparación con la base de referencia de 2019.

EN MARCHA

ÁREAS DE INTERÉS EN PRODUCTOS Y DISEÑO



SUSTANCIAS NO DAÑINAS

Reducir el uso de productos químicos en nuestra elección de materiales para evitar la exposición a sustancias preocupantes y permitir una circulación segura.



EMBALAJE Y LOGÍSTICA CIRCULAR

Repensar el envasado y la forma en que enviamos los productos de los proveedores a los clientes y más allá del final del ciclo de vida del producto.



INNOVACIÓN EN MATERIALES

Repensar la forma en que permitimos la circulación de nuestras piezas y productos con materiales, como los bioplásticos y los reciclados.



FABRICACIÓN EN CASCADA

Reducir y recircular los materiales, la energía y el agua de los flujos secundarios de nuestros procesos para hacer más con menos mediante el uso en cascada.



DISEÑO CIRCULAR DE LOS PRODUCTOS

Redefinir la estructura del producto para mantener los materiales al máximo valor posible en todo momento, permitiendo diseño circular.



INNOVACIÓN EN LOS SISTEMAS

Reconfigurar los sistemas sanitarios y de residuos mediante proyectos piloto y asociaciones para lograr la recogida y el reciclado reales en los principales mercados regionales.



Los dispositivos médicos de Ambu contribuyen intrínsecamente a la buena salud y el bienestar. Con esto en mente, evaluamos continuamente las sustancias utilizadas para mejorar el rendimiento de los productos y consideramos si afectan a la salud humana y al medio ambiente, y cómo lo hacen. La finalización de la eliminación progresiva de los ftalatos nocivos en nuestros productos fabricados desde 2019/20 es un ejemplo de nuestros esfuerzos a largo plazo en este ámbito.



Contribuimos al consumo y la producción responsables controlando y reduciendo nuestro consumo de energía y agua, minimizando los residuos y centrándonos en la sostenibilidad de los procesos y suministros.



A través de nuestras actividades de eficiencia energética y nuestro compromiso con la iniciativa Objetivos Científicos, aumentaremos nuestro uso de electricidad renovable, combatiendo así el cambio climático y apoyando una energía asequible y limpia.



UNA HISTORIA DE IDEAS INNOVADORAS

Ambu lleva desde 1937 dando vida a las soluciones del futuro. En la actualidad, millones de pacientes y profesionales sanitarios de todo el mundo dependen de la eficacia, seguridad y rendimiento de nuestras soluciones de un solo uso para endoscopia, anestesia y monitorización de pacientes.

Las manifestaciones de nuestros esfuerzos han abarcado desde las primeras innovaciones como el resucitador Ambu® Bag™ y el Ambu® BlueSensor™ hasta nuestras soluciones más recientes, como el Ambu® aScope™, el primer endoscopio flexible de un solo uso del mundo.

Además, miramos continuamente hacia el futuro con el compromiso de ofrecer productos innovadores de calidad que tengan un impacto positivo en su trabajo.

Con sede cerca de Copenhague (Dinamarca), Ambu cuenta con más de 4.500 empleados en Europa, Norteamérica y Asia-Pacífico.

Ambu se toma en serio las cuestiones medioambientales

Algunas de las empresas más sostenibles del mundo tienen su sede en Dinamarca, y Ambu se inspira en esta tradición.

Objetivos medioambientales de Ambu para 2025: Todos los envases serán reciclables, reutilizables o compostables; reducción del 50% de las emisiones de carbono en comparación con la línea de base de 2019; 95% libre de PVC para los productos lanzados después de 2025.

Para más información:

ambu.es/manejo-de-la-via-aerea-y-anestesia

Ambu

Firma Ambu SL
C. Santa Leonor, 65
Bloque B, Planta Baja,
derecha
Madrid, 28037, Spain
T +34 91 411 6830
www.ambu.es
ayuda@ambu.com

PUB-001173 - 2022/12 - V01 - Ambu SA
Los datos técnicos pueden ser modificados sin previo aviso.