

## HOJA TÉCNICA

aScope™ 4 Cysto es una solución de endoscopia flexible de un solo uso que le ofrece una forma de tomar el control de su agenda y ser más productivo - sin comprometer la calidad de su trabajo.

Está siempre disponible y es portátil, lo que facilita la gestión de su agenda y la tramitación de los procedimientos de consulta internos..

Con aScope™ 4 Cysto puede contar con imágenes claras y nítidas, que facilitan la identificación de estructuras anatómicas. Los elevados ángulos de flexión de 210°/120° le permiten maniobrar y navegar sin problemas por la uretra y la vejiga.

Ofrece una calidad constante sin deterioro de la imagen ni de la calidad de la flexión porque dispondrá de un cistoscopio nuevo para cada procedimiento.

aScope™ 4 Cysto es estéril y elimina la necesidad de reprocesamiento, las costosas reparaciones y el riesgo de contaminación cruzada. Como resultado, aScope 4 Cysto simplifica el flujo de trabajo, permite liberar recursos y está siempre listo cuando se necesita.

aScope™ 4 Cysto le ofrece una forma de tomar el control de su agenda y ser más productivo, sin comprometer la calidad de su trabajo. Desde la consulta ambulatoria hasta los procedimientos de hospitalización, puede llevar este cistoscopio ligero de un solo uso y el monitor portátil con usted bajo el brazo. Y cuando termine, sólo tiene que desecharlo; ya no tendrá que preocuparse de su limpieza.

Cuando se combina con el monitor portátil Full-HD aView™ 2 Advance de 12,8", esta plataforma de cistoscopia flexible de un solo uso proporciona una solución eficaz para todos los procedimientos de cistoscopia flexible en diferentes entornos clínicos.

# Ambu® aScope™ 4 Cysto

## Un solo uso, nuevas posibilidades



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Listo cuando usted lo esté

Un dispositivo nuevo cada vez

Una solución portátil sin complicaciones

Imágenes y maniobrabilidad excelentes

Esterilidad garantizada sin riesgo de contaminación cruzada

Libera recursos al eliminar el reprocesamiento y las costosas reparaciones

# Ambu

## ESPECIFICACIONES

### Sistema óptico

Campo de visión	120°
Profundidad de campo	3 - 100 mm
Método de iluminación	LED

### Porción de inserción

Ángulo de flexión*	210° arriba, 120° abajo
Diámetro del cordón de inserción	16.2 Fr / 5.4 mm (0.21")
Diámetro del extremo distal	16.2 Fr / 5.4 mm (0.21")
Diámetro máximo de la porción de inserción	18 Fr / 6.0 mm (0.24")
Longitud de trabajo	390 mm (15.4")

### Canal de trabajo

Anchura mínima del canal del instrumento**	6.6 Fr / 2.2 mm (0.086")
--	--------------------------

### Almacenamiento

Temperatura***	10 - 25 °C (50 to 77 °F)
Humedad relativa	10 - 85 %
Presión atmosférica	50 - 106 kPa

### Transporte

Temperatura	-10 - 55 °C (14 to 131 °F)
Humedad relativa	10 - 95 %
Presión atmosférica	50 - 106 kPa

### Operating environment

Temperature	10 - 40 °C (50 to 104 °F)
Humedad relativa	30 - 85 %
Presión atmosférica	80 - 106 kPa
Altitud	≤ 2000 m

### Esterilización

Método de esterilización	ETO
--------------------------	-----

### Material

Ftalatos DEHP	No contiene ftalatos DEHP
Sin sustancias alergénicas	No fabricado con látex de caucho natural

### Dimensiones

Peso	158 g
------	-------

## ESPECIFICACIONES DEL PEDIDO

Producto	Ref.	Cantidad
Ambu® aScope™ 4 Cysto, Deflexión inversa	600001000	5 uds
<b>Accesorios</b>		
Llave de paso de 4-vías. 50 psi (3.5 bar).		
Tuerca de rotación, Orificio grande****	K12-11412	50 pcs
Válvula de hemostasia. AccessPLUS™, Orificio grande****	K12-11413	25 pcs

\* Tenga en cuenta que el ángulo de flexión puede verse afectado si el cordón de inserción no se mantiene recto o se han insertado accesorios endoscópicos.

\*\* No se garantiza que los accesorios endoscópicos seleccionados únicamente utilizando esta anchura mínima del canal de trabajo sean compatibles en combinación.

\*\*\* El almacenamiento a temperaturas más elevadas puede afectar a la vida útil.


\*\*\*\* No disponible en todos los países.



aScope™ 4 Cysto está siempre disponible y portátil.



Ángulos de flexión elevados de 210°/120°

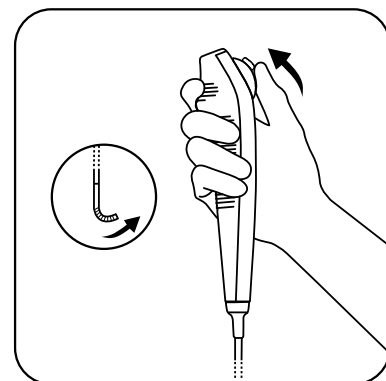

**Deflexión inversa**  
**Palanca arriba = Punta abajo**  
**Palanca abajo = Punta arriba**

# Ambu

#### Ambu A/S

Baltorpbakken 13  
 DK - 2750 Ballerup  
 Denmark  
 Tel. +45 7225 2000  
 Fax +45 7225 2053  
 www.ambu.com

#### Firma Ambu SL

C. Santa Leonor, 65  
 Bloque B, Planta Baja,  
 derecha  
 Madrid, 28037,  
 Tel. +34 91 411 68 30  
 www.ambu.es

CE  
 2797

US: Rx Only