

HOJA TÉCNICA

VivaSight 2 DLT es un tubo endobronquial de doble luz y un solo uso indicado para intervenciones de aislamiento del pulmón izquierdo o del pulmón derecho de un paciente, o para la ventilación unipulmonar.

VivaSight 2 DLT está indicado para la verificación de la colocación y reposicionamiento del tubo.

Aumente la seguridad del paciente con una visualización continua

El VivaSight 2 DLT puede aumentar la seguridad del paciente, ya que le permite realizar un seguimiento de la colocación del tubo y detectar y corregir un posicionamiento incorrecto.

Mejore el flujo de sus procedimientos

La visualización continua puede afectar positivamente a la gestión del paciente y al flujo de trabajo del procedimiento porque:

- Permite un tiempo de intubación más rápido que con los TDL convencionales.
- Facilita la correcta colocación del tubo.
- Reduce significativamente la necesidad de utilizar un broncoscopio.
- Permite la detección y corrección inmediata del desplazamiento del tubo.


La gama completa de productos VUP de Ambu incluye el VivaSight 2 DLT y el Ambu® VivaSight™ 2 SLT con cámara integrada, El bloqueador endobronquial Ambu® VivaSight™ y el broncoscopio de un solo uso, Ambu® aScope™ 4 Broncho Slim.

El VivaSight 2 DLT se puede conectar al monitor Full-HD de Ambu, el aView 2 Advance, para obtener imágenes de alta calidad y vista dual.

Como alternativa, el VivaSight 2 DLT también puede conectarse al monitor Ambu aView.

Ambu® VivaSight™ 2 DLT

La segunda generación de tubos de doble luz de Ambu para la ventilación unipulmonar (VUP)

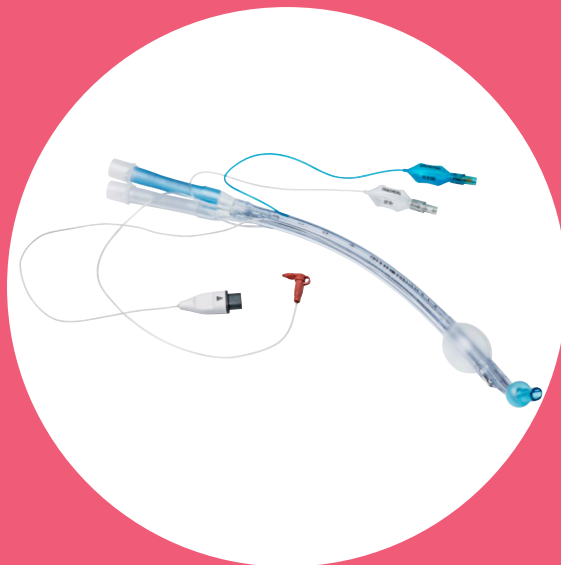

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Aumenta la seguridad del paciente

Mejora el flujo de trabajo del procedimiento

Alternativa rentable para la ventilación unipulmonar

Reduce significativamente la necesidad de utilizar un broncoscopio

Es compatible con el monitor Ambu® aView™ 2 Advance y con el monitor Ambu® aView™

*Ambu® VivaSight™ 2 SLT pendiente de marcado CE.
Por favor consulte más información con un representante de Ambu.

Ambu

ESPECIFICACIONES

Ambu® VivaSight™ 2 DLT	35 Fr Izquierdo	37 Fr Izquierdo	39 Fr Izquierdo	41 Fr Izquierdo
Tamaño	35 Fr	37 Fr	39 Fr	41 Fr
D. I. Traqueal (mm - real)	4.4	4.6	4.8	5.0
D. I. Bronquial (mm - real)	4.4	4.6	4.8	5.0
D. E. (mm - bronquial)	10.5	11.0	11.5	12.0
Longitud (±10 mm)	330	330	330	330

General

Uso: De un solo uso

Envase: Suministrado en envases individuales, con esterilización ETO

Vida útil: 36 meses

Almacenamiento: Almacenar a una temperatura de entre 10 °C y 25 °C, en un lugar seco y alejado de la luz

Materiales

Tubo: PVC sanitario; puerto de inyección adicional para lavar la óptica de la cámara

Balón: PVC sanitario, gran volumen, baja presión

Dureza del tubo: 85 (Shore A)

Este producto no contiene ftalatos

El kit VivaSight 2 DLT incluye	Cantidad
VivaSight 2 DLT con conector en Y	1
Ambu® VivaSight™ 2 Cable Adaptador	1
Ambu® VivaSight™ Catéter de aspiración curvado de 10 FR	2

Cámara

Sensor de imagen: CMOS

Fuente de luz

LED: 2 blancas


ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Kit de Ambu® VivaSight 2 DLT	Ref.	Cantidad/caja
Ambu® VivaSight 2 DLT Kit 35 Fr - Izquierdo (con cable adaptador)	412351000	5
Ambu® VivaSight 2 DLT Kit 37 Fr - Izquierdo (con cable adaptador)	412371000	5
Ambu® VivaSight 2 DLT Kit 39 Fr - Izquierdo (con cable adaptador)	412391000	5
Ambu® VivaSight 2 DLT Kit 41 Fr - Izquierdo (con cable adaptador)	412411000	5

Monitores	Ref.	Cantidad/caja
Monitor Ambu® aView™ 2 Advance Monitor	405011000	1
Monitor Ambu® aView™	405002000	1



Ambu® VivaSight™ 2 DLT

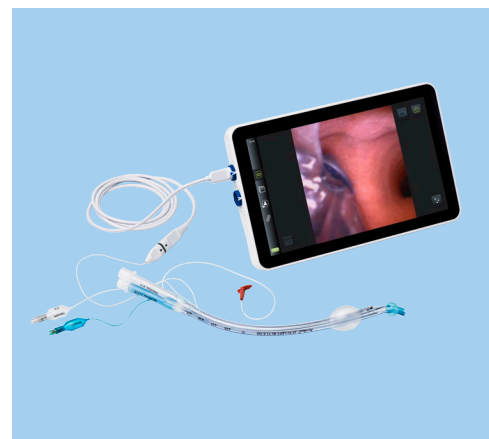

Ambu® VivaSight™ 2 DLT conectado al monitor Ambu® aView™ 2 Advance

Ambu

Firma Ambu S.L.
Alcalá, 261-265,
Edf. 4-4º izq.
28027 Madrid
T (+34) 91 411 68 30
ambu.es

🏢 Ambu A/S
Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
ambu.com

CE 2797