

Ambu® aScope™

Duodeno

Estéril

De un solo uso

Problema resuelto



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Estéril
- No hay riesgo de contaminación cruzada
- Transparencia de costes
- Elimina el riesgo y los costes de reprocesado
- Diseño y funcionamiento familiar, similar a los duodenoscopios reutilizables

HOJA TÉCNICA

Estéril desde su embalaje, Ambu aScope Duodeno es un endoscopio de un solo uso con visión lateral y elevador para controlar la posición de los accesorios endoscópicos compatibles.

Con aScope™ Duodeno, tienes un endoscopio nuevo con un rendimiento consistente en todo momento, y no hay riesgo de contaminación cruzada. Además, no es necesario realizar costosos reprocesamientos o reparaciones.



Punta distal demostrando el funcionamiento del elevador con un esfinterotomo.



Palanca de control del elevador para elevar (arriba) y bajar (abajo) el elevador.

Ambu

ESPECIFICACIONES

Sistema óptico

Dirección de visión	Visión lateral hacia atrás con un ángulo de 6°
Campo de visión	130°

Sección de inserción

Diámetro externo del extremo distal	φ 13.7 mm
Diámetro externo del tubo de inserción	φ 11.3 mm
Longitud de trabajo	1240 mm

Sección de flexión

Rango de angulación	Arriba 120° / Abajo 90° Izquierda 90° / Derecha 110°
---------------------	---

Iluminación

Método de iluminación	Doble LED
-----------------------	-----------

Dimensiones


Peso	700 g
------	-------

ESPECIFICACIONES DE PEDIDO*

Referencia	Descripción	Cantidad	Número EAN
485001000	aBox Duodeno	1	5707480139736
482001000/4	aScope Duodeno	Caja de 1**	5707480157402
482001000	aScope Duodeno	Caja de 6	5707480157402

*Algunas configuraciones pueden no estar disponibles en todos los países.

**Cada caja interior contiene un endoscopio y unas instrucciones de uso

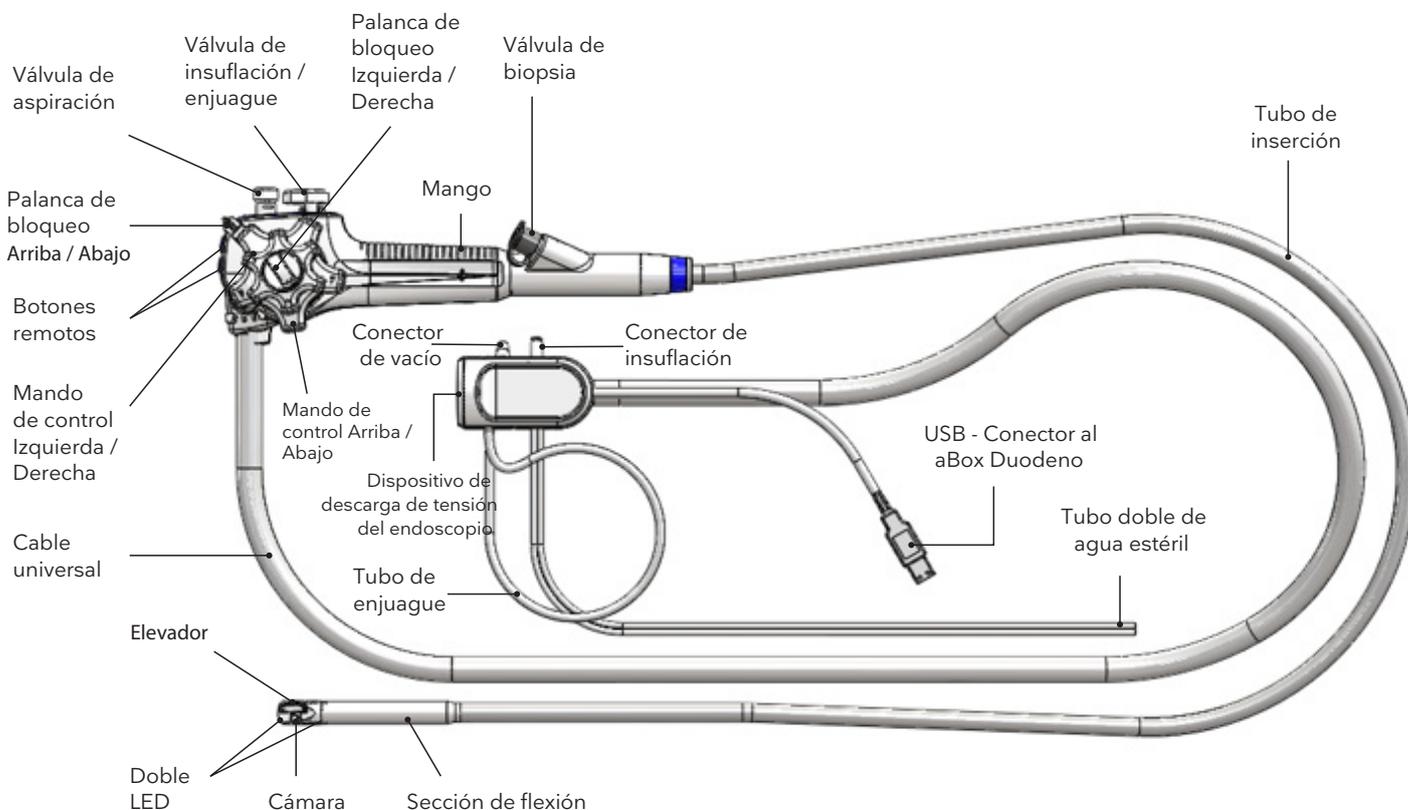

Ambu

Firma Ambu SL

C. Santa Leonor, 65
Bloque B
Planta Baja derecha
Madrid, 28037, Spain
www.ambu.es



Obtenga más información:



2797